

DomotIcApp - Documentation utilisateur

Diane DEWEZ, Iman AKABI,
Enora LUCAS, Meven MOSER, Corentin CHATELLIER

Encadrants : François PASTEAU, Daniel GUILLARD

- 1 Page principale**
- 2 Utilisation d'un équipement**
 - 2.1 Mise en marche d'un équipement**
- 3 Accès aux informations du fauteuil**
- 4 Retour à la page principale**

1 Page principale

En lançant l'application, vous arrivez sur le menu principal. Les différentes pièces de votre logement sont représentées sur la grille principale. Vous pouvez parcourir les pages contenant les autres pièces en cliquant sur les flèches sous cette grille.



FIGURE 1 – Page d'accueil, vue des pièces de la maison

2 Utilisation d'un équipement

Cliquez sur la pièce dans laquelle se trouve l'équipement que vous souhaitez utiliser.

Une nouvelle grille présente les équipements que vous pouvez utiliser dans cette pièce. Vous pouvez les parcourir en cliquant sur les flèches sous cette grille.

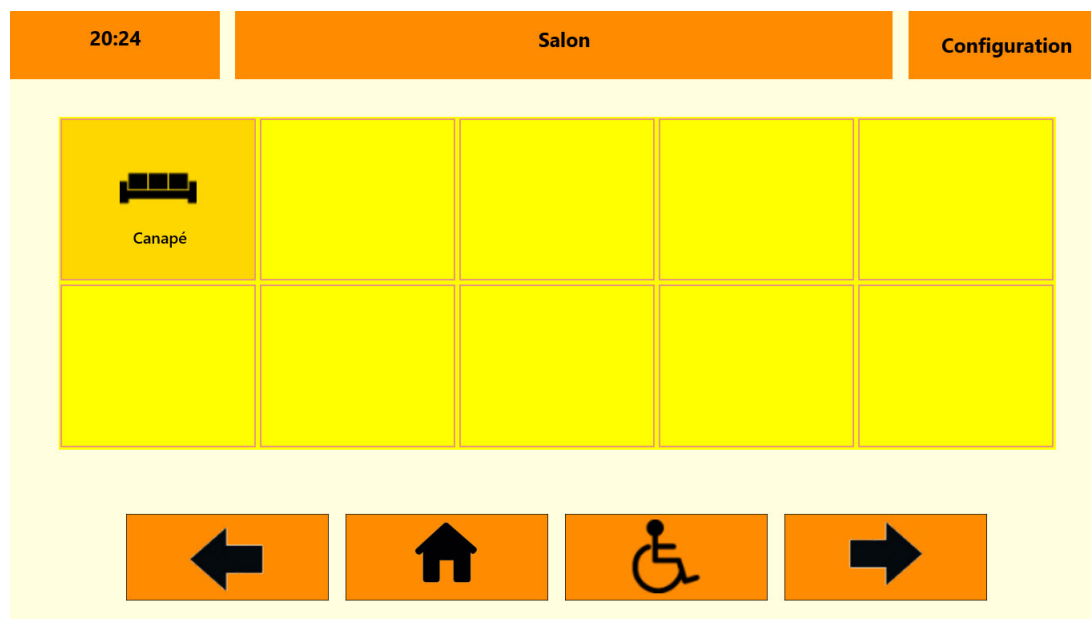


FIGURE 2 – Equipements présents dans la pièce "Salon"

2.1 Mise en marche d'un équipement

Pour mettre en marche un appareil, cliquez sur l'icône le représentant.

3 Accès aux informations du fauteuil

Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez accéder à la page présentant différentes informations sur le fauteuil. Cliquez sur le bouton en haut à droite représentant un fauteuil roulant. Vous y trouverez notamment sa vitesse et la position du joystick.



FIGURE 3 – Bouton pour accéder aux informations du fauteuil

4 Retour à la page principale

Pour retourner au menu principal, cliquez sur "Accueil" en bas de la grille.

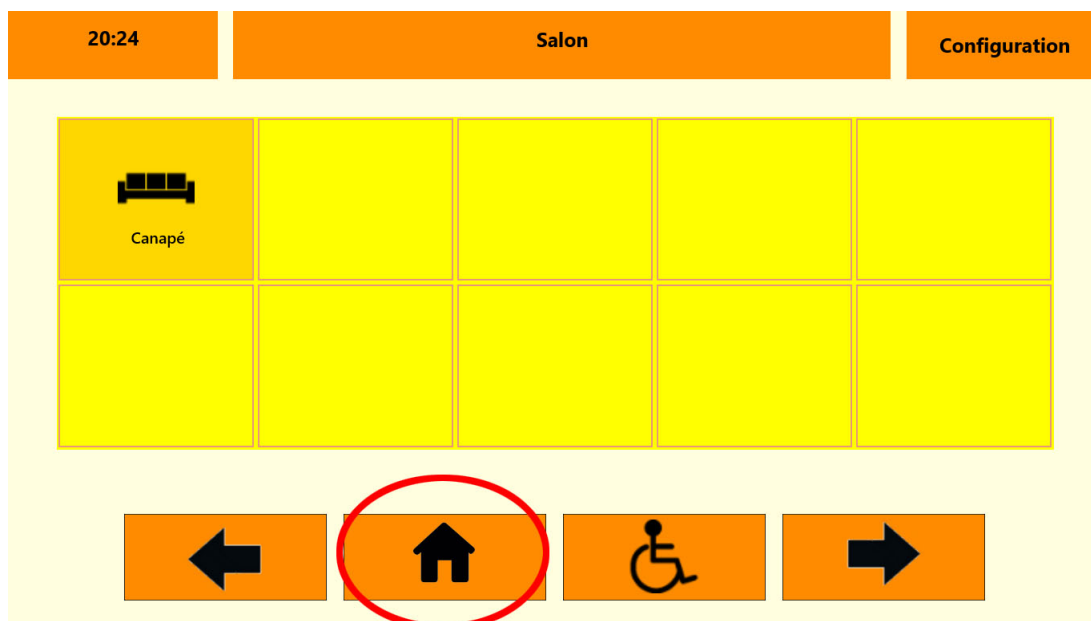


FIGURE 4 – Bouton pour retourner au menu principal